



Siem-Nova S.r.l.

Via C. Varalli n° 1 C/18/19 - 20089 Rozzano (Milano)

tel: +39 02 57510916 - fax: +39 02 57511879

web site: <http://www.siemnova.com>

e-mail: info@siemnova.com

Siem Nova dal 1953 è un'azienda leader
tra i principali produttori di apparecchiature medicali.

Vende ed assiste prodotti aventi proprio marchio.

Commercializza prodotti con diverso marchio.

Siem Nova è in grado di offrire attività di ingegneria clinica.

La flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le esigenze
operative di ogni tipologia di clientela, sia con la gestione del servizio
di manutenzione preventiva che con interventi di manutenzione correttiva.

CATALOGO

ISTEROSUTTORI

ED ACCESSORI ...



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L'isterosuzione consiste nell'aspirazione dell'embrione e dell'endometrio attraverso una cannula introdotta nell'utero senza la necessità di dilatazioni della cervice. Lo svuotamento strumentale è la metodologia maggiormente diffusa ed avviene in anestesia parziale. L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell'interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto e nella sua rimozione dall'utero. La Legge 194/78 affida alla donna la facoltà di decidere in ogni momento della gravidanza.

L'isterosuttore 6110 A1 CURET MAX è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. oppure da 120 L/min è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A1 CURET MAX
Codice: 66192 - 66192.1

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO
ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa
Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,98 bar

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57718/R - CND Z 12080203)

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**
Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**
Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**
Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**
Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**
Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**
Vita operativa prevista: **10 anni**
Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 22 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:
120 L/min, 98 kPa codice: 66192 (da 7,2 m3/h)
90 L/min, 98 kPa codice: 66192.1 (da 5,4 m3/h)
Tempo per raggiungere **0,6 bar: 3,00"** con vaso da 3000ml.

Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 2 da 3000 ml,
Predisposizione all'utilizzo con contenitori monouso.

Deviatore rapido di aspirazione: vaso1 - vaso 2
Regolatore di precisione della potenza di aspirazione
Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON
Antirimpimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.
Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB
Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.
L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliori alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.



CE 0051

Siem - Nova




Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L' isterosuttore 6110 A1 CURET MAX è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. oppure da 120 L/min è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

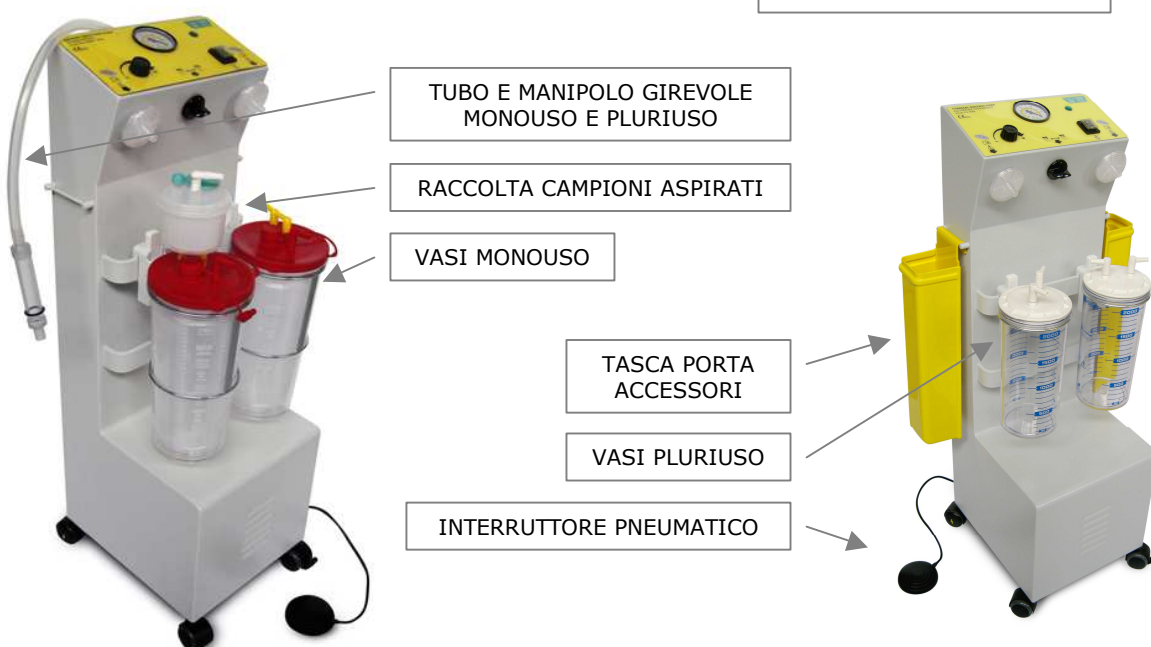

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L'isterosuzione consiste nell'aspirazione dell'embrione e dell'endometrio attraverso una cannula introdotta nell'utero senza la necessità di dilatazioni della cervice. Lo svuotamento strumentale è la metodologia maggiormente diffusa ed avviene in anestesia parziale. L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell'interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto e nella sua rimozione dall'utero. La Legge 194/78 affida alla donna la facoltà di decidere in ogni momento della gravidanza.

L'isterosuttore 6110 A2 CURET SPEEDY è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. oppure da 120 L/min è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A2 CURET SPEEDY
Codice: 66196 - 66195

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO
ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa
Depressione massima regolabile: **0 ÷ - 0,87 bar**

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57718/R - CND Z 12080203)

Modalità d'impiego **FUNZIONAMENTO CONTINUO**
Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**
Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**
Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**
Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**
Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**
Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**
Vita operativa prevista: **10 anni**
Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 20 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:
120 L/min, 98 kPa codice: 66196 (da 7,2 m3/h)
90 L/min, 98 kPa codice: 66195 (da 5,4 m3/h)
Tempo per raggiungere **0,6 bar: 3,00"** con vaso da 3000ml.


Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 1 da 3000 ml,
Predisposizione all'utilizzo con contenitori monouso.

DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE
Antiriempimento eccessivo con valvole di troppo pieno.
Anticontaminazione con filtro idrofobico antibatterico/virale

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON
Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar
Regolatore della potenza di aspirazione da 0,2 bar al vuoto massimo

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB
Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.
L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

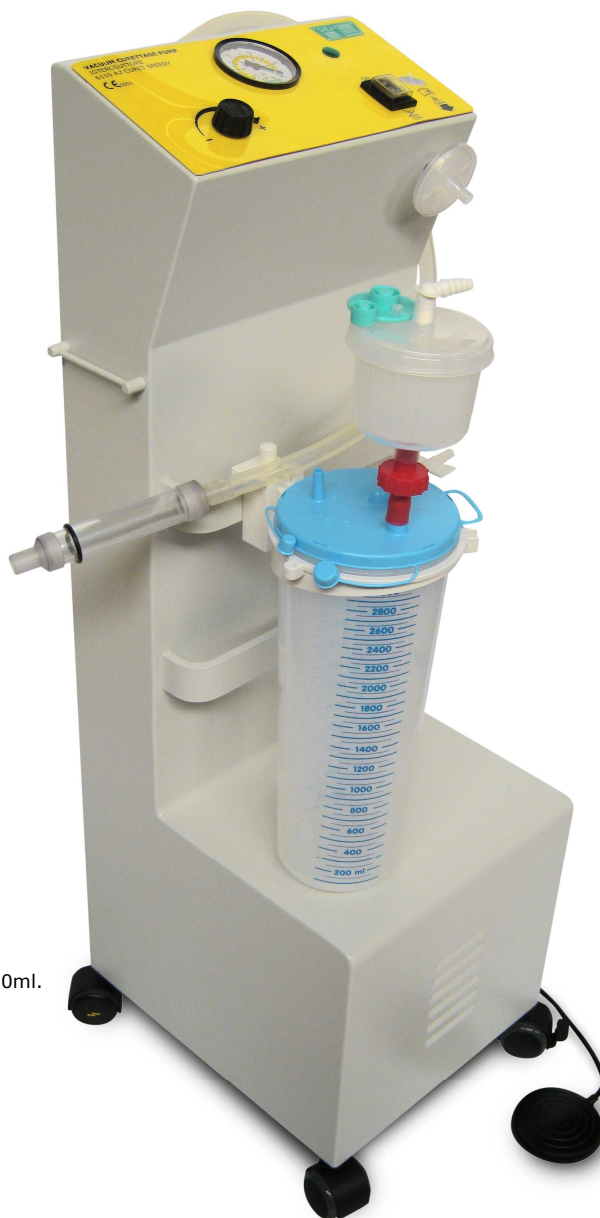

CE0051

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L'isterosuttore 6110 A2 CURET SPEEDY è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. oppure da 120 L/min è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L'isterosuzione consiste nell'aspirazione dell'embrione e dell'endometrio attraverso una cannula introdotta nell'utero senza la necessità di dilatazioni della cervice. Lo svuotamento strumentale è la metodologia maggiormente diffusa ed avviene in anestesia parziale. L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell'interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto e nella sua rimozione dall'utero.

La Legge 194/78 affida alla donna la facoltà di decidere in ogni momento della gravidanza.

L'isterosuttore 6110 A4 CURET JUNIOR è un aspiratore potente, concepito per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori. La pompa aspirante di grande potenza, da 30 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto a 0,6 BAR in un vaso da 2000 ml in 6,88" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio facilmente trasportabile è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato con maniglia.



**6110-A4
CURET JUNIOR
Codice: 66139**

CE 0051

**ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO
ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 87 kPa**
Depressione massima regolabile: **0 ÷ - 0,87 bar**

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57718/R - CND Z 12080203)

Modalità d'impiego **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **95 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

**Telaio in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro**

• **Larghezza 360, prof. 320, H. 220mm**

• **Peso 6,5 Kg.**

• **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante OIL-LESS 30 L/min. circa 2,0 m3/h

Tempo per raggiungere 0,6 bar: 6,88" con vaso da 2000 ml

9,66" con vaso da 3000 ml.

DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE

Antiriempimento eccessivo con valvola di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtro idrofobico antibatterico/virale

Vaso di raccolta pluriuso con predisposizione al monouso:

n° 1 oppure 2 contenitori da 2000 ml.

Vuotometro a lancetta Da 0 a -1 bar

Regolatore della potenza di aspirazione da 0,2 bar al vuoto massimo

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ISTEROSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

L'isterosuttore 6110 A4 CURET JUNIOR è un aspiratore potente, concepito per l'aspirazione strumentale dell'embrione o del feto e per poter operare in assoluta sicurezza per la paziente e gli operatori. La pompa aspirante di grande potenza, da 30 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto a 0,6 BAR in un vaso da 2000 ml in 6,88" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio facilmente trasportabile è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato con maniglia.



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE
(D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60974	Z12080203	57718/R	TAPPO COPRIVASO IN POLICARBONATO	Pezzi:1
60322	A060102	29654	TUBO PER IVG CON MANIPOLO GIREVOLE	Pezzi:20
60969	Z12080203	57718/R	RACCOLTA CAMPIONI 300ml	Pezzi:18
60971	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 1000 ml	Pezzi:15
60972	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 2000 ml	Pezzi:10
60973	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 3000 ml	Pezzi:5



ACCESSORI
ISTEROSUTTORE



Il dispositivo FLOVAC® **CANISTER REUSABLE** viene utilizzato per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione ed è stato progettato e costruito per applicazioni di **ALTO FLUSSO** ed **ALTO VUOTO** (EN ISO 10079-3). Costituito da un contenitore rigido in policarbonato pluriuso e da un tappo in policarbonato sterilizzabile. La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il paziente, sia per il personale addetto alla rimozione o sostituzione del dispositivo stesso.

Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal DPR, finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio.

Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e/o **sterilizzato in autoclave a 121 °C** (pressione relativa 1 bar) per 15 min. Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione, perché l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3).

Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle Caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova




Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORE

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 12748/R – CND: Z120105)

Codice	Descrizione
90059.1	Vaso in policarbonato MAK 2000 ml con tappo e valvola di troppo pieno può contenere sacche monouso
90060	Vaso in policarbonato MAK 4000 ml con tappo e valvola di troppo pieno
60972	Vaso in policarbonato LINER 2000 ml può contenere sacche monouso
60973	Vaso in policarbonato LINER 3000 ml può contenere sacche monouso
60974	TAPPO in policarbonato per LINER
60475	Innesto derling diametro 10 mm
60478	Innesto derling su valvola di troppo pieno
60817	Valvola di troppo pieno
60851	Vaso in vetro e makrolon 1600 ml
60852	Vaso in vetro e makrolon 3000 ml
60854	Vaso in vetro e makrolon 4000 ml
60811	TESTINA IN POLICARBONATO PER VASO IN VETRO con valvola di troppo pieno
60181	Vaso in policarbonato YDX 3000 ml con tappo e valvola di troppo pieno

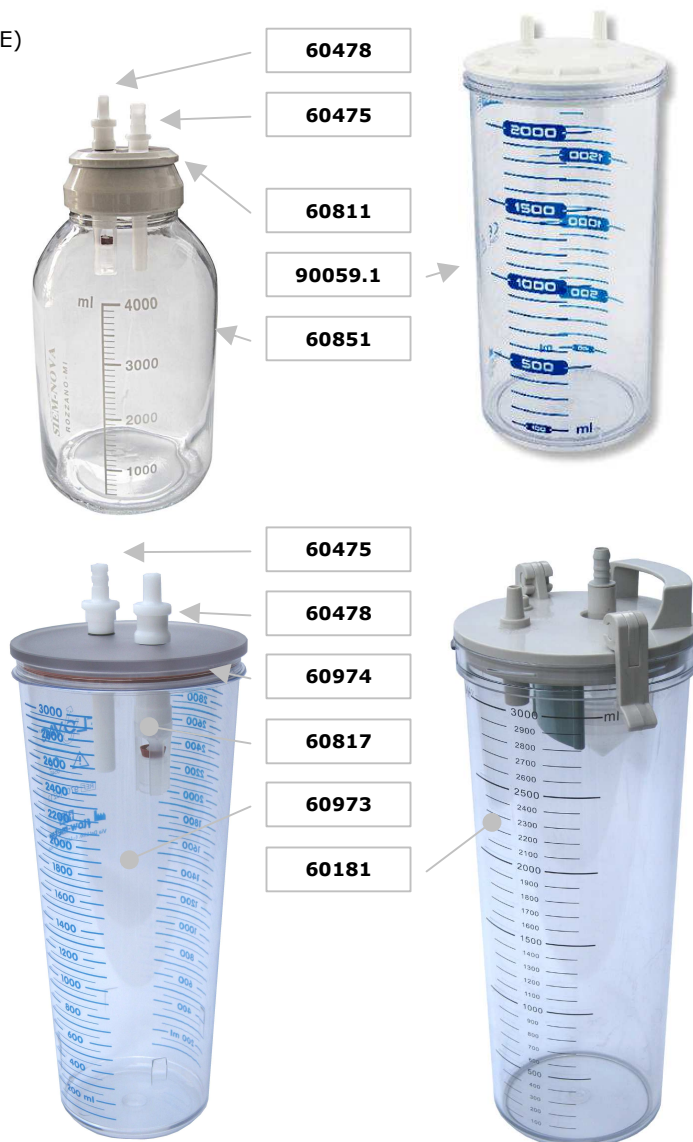

La ventosa ostetrica necessita di manutenzione ordinaria dopo ogni utilizzo.

Dopo l'uso devono essere sostituiti tutti i prodotti classificati monouso: tubazione, raccordi, contenitori di liquidi organici, filtri anticontaminazione virale/batterica, ecc... Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal DPR 28/11/90 è finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio. Gettare il prodotto aspirato rispettando le norme in vigore presso l'ospedale.

Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e/o sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.

Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione: l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente. La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI E SACCHE MONOUSO

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE
(D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60322	A060102	29654	TUBO PER IVG CON MANIPOLO GIREVOLE	Pezzi:20
60969	Z12080203	57718/R	RACCOLTA CAMPIONI 300ml	Pezzi:18
60968.5	A0680	84649	RACCORDO ROSSO	Pezzi:20
60965	A0699	101142	LINER SACCA 1000 ml	Pezzi:50
60966	A0699	101142	LINER SACCA 2000 ml	Pezzi:50
60967	A0699	101142	LINER SACCA 3000 ml	Pezzi:50
60971	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 1000 ml	Pezzi:15
60972	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 2000 ml	Pezzi:10
60973	A0699	101179	CANISTER REUSABLE 3000 ml	Pezzi:5



ACCESSORI
ISTEROSUTTORE

Il dispositivo FLOVAC® LINER

viene utilizzato per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione ed è stato progettato e costruito per applicazioni di "ALTO FLUSSO ed ALTO VUOTO" (EN ISO 10079-3).

Liner: costituito da una sacca saldata ermeticamente al coperchio (sistema di raccolta ad uso singolo) e da un contenitore rigido di supporto.

La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il paziente, sia per il personale addetto alla rimozione o sostituzione del dispositivo stesso.

Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal DPR, finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio.

Il contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e/o

sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min. Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione, perché l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3).

Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle Caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI E SACCHE MONOUSO

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

Il **Sistema di Aspirazione Serres** è utilizzato per l'aspirazione clinica di sangue ed altri liquidi. Il Sistema Serres è composto da contenitori e linee riutilizzabili. Esistono tre gamme di prodotti con tre taglie: il sistema da 1000 ml è utilizzato in anestesia e, grazie alle ridotte dimensioni è idoneo ad essere utilizzato in ambienti ristretti come ad es. le ambulanze; il sistema da 2000 ml è il più utilizzato; il sistema da 3000 ml è utilizzato quando devono essere trattate grosse quantità di liquidi.

Il **Sistema di Aspirazione in linea Serres** è rivoluzionario rispetto ai sistemi tradizionali. Tutti i sistemi Serres hanno solo una connessione, connettendo il tubo del paziente il sistema è pronto per l'utilizzo. L'obiettivo di Serres è sempre stato il comfort e la sicurezza del paziente e dello staff ospedaliero. Ogni sistema Serres in linea è equipaggiato con un filtro idrofobico, che funziona sia come filtro battericida che come protezione per riempimento eccessivo. La connessione unica assicura un corretto uso anche in casi di applicazioni complicate come l'ICU o altre emergenze. Il film utilizzato per il sistema in linea è molto forte, e rispecchia i più alti requisiti per applicazioni di aspirazioni continue.

Il **sistema di aspirazione Serres** in linea è stato disegnato per migliorare l'igiene e per prevenire le infezioni. Utilizzando il sistema in linea i liquidi vengono contenuti senza rischi di esposizione diretta ed il filtro idrofobico blocca automaticamente il sistema impedendo il riempimento eccessivo. Lo smaltimento del materiale viene fatto in accordo alle norme dell'ospedale e alle direttive di riferimento in accordo al luogo di utilizzo.

Il sistema Serres OV è prodotto nel rispetto della natura ed alla riduzione dell'inquinamento, quindi totalmente privo di PVC.

Conforme alle Norme e direttive di riferimento

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60950	A06030499	1481	SACCA 1000 ml	Pezzi:36
60951	A06030499	1481	SACCA 2000 ml	Pezzi:24
60952	A06030499	1481	SACCA 3000 ml	Pezzi:24
60950G	A06030499	1481	SACCA 1000 ml CON GELIFICANTE	Pezzi:32
60951G	A06030499	1481	SACCA 2000 ml CON GELIFICANTE	Pezzi:22
60952G	A06030499	1481	SACCA 3000 ml CON GELIFICANTE	Pezzi:20
60960	A06030401	2839	CANISTER REUSABLE 1000 ml	Pezzi:10
60961	A06030401	2839	CANISTER REUSABLE 2000 ml	Pezzi:10
60953	A06030401	2839	CANISTER REUSABLE 3000 ml	Pezzi:10



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliori alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA CAMPIONI

L'utilizzo di questo set è sicuro e pratico ed elimina anomalie specie quando i tessuti sono delicati, ad esempio nell'ambito di procedure ginecologiche di aborto.

Lo svuotamento strumentale mediante aspirazione è la metodologia maggiormente diffusa. L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell'interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto e nella sua rimozione dall'utero. La Legge 194/78 affida alla donna la facoltà di decidere in ogni momento della gravidanza.

SPECIMEN SET
Codice: 60969

Descrizione del prodotto

Compatibile con tutti i modelli di sacca di aspirazione SERRES

Il set raccoglie le parti di tessuto aspirate durante la procedura di suzione

Il tessuto è raccolto in un filtro interno alla coppa ed è rimovibile.

Il filtro raccoglie le particelle dei tessuti che sono più grandi di 1 mm.

Il contenitore è pronto per il laboratorio dopo l'aggiunta di formalina o altri conservanti e dopo averlo staccato dal coperchio della sacca.

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI ASPIRATI,

posizionato tra il set di aspirazione ed il contenitore di raccolta dei fluidi organici aspirati, è stato progettato specificatamente per non dover toccare il materiale. Facile da utilizzare, il dispositivo viene applicato e chiuso ermeticamente. La struttura in plastica, che può essere trasparente, permette una facile visualizzazione ed identificazione dei tessuti aspirati. Alla fine della procedura il contenitore viene sigillato con due tappi da entrambe le aperture e, grazie alla chiusura ermetica del contenitore, può essere trasportato in tutta sicurezza per l'esame istologico o per lo smaltimento. Il tappo che sigilla la parte inferiore ha una doppia funzione perché rende possibile un posizionamento verticale del dispositivo.

Per la conservazione dei tessuti aspirati nel contenitore si può utilizzare la formalina, e tutto il dispositivo può essere smaltito mediante inceneritore.

Caratteristiche tecniche:

Specimen set: codice **60969**

Fornito in confezione da **18 pz / scatola**.

Il contenitore per raccolta campioni è utilizzato per la raccolta (attraverso il vuoto) e lo stoccaggio temporaneo di tessuti organici.

Capienza volume aspirazione 300ml

Materiale: Polipropene, Filtro (PP); 2 tappi (HDPE).

Sterilizzato: No

Durata: Monouso

Caratteristica dell'imballo: Scatola

Colore: Trasparente/opaco

Prodotto in ambiente controllato in accordo con la direttiva ISO 13485

Classe I Non-Sterile.

Conforme alle Norme e direttive vigenti ISO 9001 - ISO 13485 - CEI EN

60601-1 (CEI 62-5); Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)

CND: Z 12080203 - RDM: 57718/R



CE 0051

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità**.

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI E SACCHE MONOUSO

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI

DESCRIZIONE : Il dispositivo è una sacca di raccolta di diverse capacità, costituita da:

- Attacco al vuoto centralizzato dotato di valvola non meccanica interna con funzione di filtro antibatterico per la protezione da contaminazioni; il dispositivo è autosigillante e garantisce l'assoluta assenza di fuoriuscita di fluidi.
- Attacco al paziente dotato di valvola unidirezionale con antireflusso al distacco tubo paziente, antischiama, protezione aerosol e protezione fumi. Diametro interno 7 mm., esterno 8,5 mm.
- Accesso con chiusura di sicurezza per immissione di sostanze coagulanti e/o battericide, con possibilità di prelevare campioni di aspirato.
- Chiusura di sicurezza con tubo e raccordo flessibile di facile introduzione.
- Depressione massima di utilizzo - 560 mmHg (-750 mBar)

Per le differenti capacità vedere la sottostante tabella.

APPLICAZIONI: Il dispositivo è destinato alla raccolta di liquidi biologici diversi in ambito chirurgico.

Esso può inoltre essere utilizzato in tandem sino ad un massimo di 20 contenitori.

MATERIALE : Polietilene specifico per applicazioni medicali.

Il dispositivo è privo di lattice.

CONFEZIONAMENTO: Confezionato singolarmente in singola busta. Confezione multipla (vedere tabella).

CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CE (s.m.i.): Classe IIa non sterile.

STERILIZZAZIONE: Il dispositivo è venduto in forma non sterile.

STOCCAGGIO: Normali procedure di immagazzinamento. Temperature di stoccaggio consigliate tra 10° C e 35° C.

SMALTIMENTO: Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.



VASO RIGIDO PER SACCA

codice	CND	RDM	capacità ml	confezione
60968.1	A0680	84360	1000	Pz. 4
60968.2	A0680	84360	2000	Pz. 5
60968.3	A0680	84360	3000	Pz. 4

SACCA RACCOLTA LIQUIDI

codice	CND	RDM	Capacità ml	confezione
60941	A0680	84289	1000	Pz. 60
60942	A0680	84360	2000	Pz. 50
60968	A0680	84360	3000	Pz. 20

RACCORDO PER SACCA E TUBO IVG

60968.0	A0680	84649	Pz. 20
---------	-------	-------	--------

VASO RIGIDO PER SACCA RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI

DESCRIZIONE : Il dispositivo è un contenitore rigido pluriuso per sacche di raccolta liquidi aspirati di diverse capacità.

APPLICAZIONI: Alloggiamento pluriuso per sacche di raccolta liquidi aspirati.

MATERIALE: Policarbonato specifico per applicazioni medicali. IL DISPOSITIVO È PRIVO DI LATTICE.

CONFEZIONAMENTO: Confezionato singolarmente in singola busta. Confezione multipla: vedere tabella.

CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CE (s.m.i.): Classe I non sterile.

STERILIZZAZIONE : Il dispositivo è venduto in forma non sterile.

STOCCAGGIO: Normali procedure di immagazzinamento. Temperature di stoccaggio consigliate tra 10° C e 35° C.

SMALTIMENTO: Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.

Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.

Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione: l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

TUBO E MANIPOLO GIREVOLE

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

DESCRIZIONE :

Tubo medicale di raccordo a sezione costante. Il tubo è provvisto ad una estremità di manipoLO girevole dotato di dispositivo di regolazione del vuoto per il collegamento alla cannula di aspirazione. Il manipoLO regola l'aspirazione attraverso una valvola di controllo azionabile semplicemente con un dito. Ruotando il manipoLO di 360° si ottiene una evacuazione completa della cavità uterina evitando l'attorcigliamento del tubo; il corretto orientamento della punta della curetta è indicato da una tacca di riferimento impressa sul manipoLO stesso. L'estremità opposta del tubo è invece dotata di un connettore maschio rigido che consente la connessione con il connettore femmina del contenitore di aspirazione. Il tubo è realizzato con materiale che conferisce caratteristiche di trasparenza per visualizzare il materiale biologico in aspirazione, ed antipiegamento per un più agevole utilizzo nelle diverse posizioni.

APPLICAZIONI: Il tubo è destinato ad essere utilizzato in chirurgia in particolar modo in ginecologia per I.V.G.
Da utilizzare con isterosuttore modello 6110 CURET SIEM-NOVA.

MATERIALE: PVC specifico per applicazioni medicali.

IL DISPOSITIVO È PRIVO DI LATTICE.

CONFEZIONAMENTO: Confezionato singolarmente in doppia busta. Confezione multipla (vedi tabella).
Fornito in confezione singola sterile, monouso, marcato CE.

CLASSE DI APPARTENENZA 93/42/CE (s.m.i.): Classe IIa sterile.

STERILIZZAZIONE: Prodotto sterilizzato ad ossido di etilene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

STOCCAGGIO: Normali procedure di immagazzinamento. Temperature di stoccaggio consigliate tra 10° C e 35° C.

SMALTIMENTO: Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)



Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60322	A060102	29654	TUBO E MANIPOLO GIREVOLE PER IVG Diametro tubo 10 x 16mm Lunghezza 2000 mm	Pezzi: 20

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliori alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

MANIPOLO CV2 GIREVOLE IN POLICARBONATO PLURIUSO DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

MANIPOLO CV2
Codice: 60361.1



Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60361.1	Z12080203	57718/R	MANIPOLO PLURIUSO CV2 GIREVOLE IN POLICARBONATO	Pezzi:1

Da utilizzare con ISTEROSUTTORE CHIRURGICO SERIE 6110 A ... SIEM - NOVA.

Il dispositivo dopo ogni utilizzo necessita di manutenzione ordinaria.

Il personale deve essere dotato di protezione individuali (camici, mascherine, guanti, schermi, occhiali, visiere, paraspruzzi, ecc.). La procedura è finalizzata a ridurre la carica microbica, prevista dal DPR 28 settembre 1990 a tutela dell'operatore, limita il rischio di contagio e stabilisce che tutti i presidi riutilizzabili venuti a contatto con materiale potenzialmente infetto, devono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in una soluzione di Fenoli per 30 minuti (vedi prontuario disinfettanti).

L'impugnatura trasparente CV2 per I.V.G., deve essere smontata dai raccordi e dal tubo che la compongono. Il personale addetto deve rimuovere il materiale organico ponendo massima attenzione ad eventuali residui, disinfettare utilizzando detergenti neutri, risciacquare abbondantemente con acqua corrente e sterilizzarlo in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.

Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione, perché l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica dell'impugnatura trasparente CV2 per I.V.G viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3).

Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

TUBAZIONE IN SILICONE PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON ASPIRATORI CHIRURGICI IMPIEGATI NELLA RACCOLTA DI LIQUIDI ORGANICI

TUBO SILICONE trasparente durezza SR-80/T

Codice: 66234 diametro 10 x 16 mm. Confezione 30m
Codice: 66235 diametro 9 x 15 mm. Confezione 30m
Codice: 66233 diametro 7 x 13 mm. Confezione 30m
Codice: 66232 diametro 6 x 10 mm. Confezione 30m
Codice: 66231 diametro 5 x 9 mm. Confezione 30m

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 12748/R – CND: Z120105)

Utilizzo: Prodotto impiegato nella raccolta di liquidi organici,
da utilizzare con aspiratore chirurgico SIEM-NOVA.
Temperatura d'impiego: Min. -60 °C Max 200 °C
Composizione elastomero siliconico di base: V M Q



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Peso specifico UNI 7092-A g/cm³ 1,210 +/- 0,020
Durezza UNI 4916 SHORE A 80,000 +/- 5,000
Carico di rottura UNI 6065 MPa 15,000 min
Allungamento a rottura UNI 6065 % 200,000 min
Resistenza alla lacerazione ASTM D 624/B KN/m 15,000 min
Compressione Set Sch.25% 22h a 175 °C UNI 4913/A % 40,000 max

Resistenze chimiche e fisiche:

Aria calda fino a 200 °C Ottima

Agenti atmosferici: Ottima

Ozono: Ottima

Irrigidimento bassa temperatura: Ottima

Idrocarburi alifatici: Insufficiente

Olii minerali paraffinici: Buona

Olii animali e/o vegetali: Ottima

Idrocarburi aromatici: Insufficiente

Solventi clorurati: Insufficiente

Chetoni: Sufficiente

Acidi Sufficiente

Basi: Sufficiente

Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e fisiche si devono considerare indicazioni di massima, e comunque i dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la società siem-nova.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

CANNULE MONOUSO PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA

DA UTILIZZARE CON ISTEROSUTTORI CHIRURGICI

Prodotto monouso sterile, fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione. Conforme alle Norme e direttive di riferimento, DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)



Caratterizzata da 2 punti di aspirazione laterali e da una estremità chiusa e arrotondata. La flessibilità del materiale permette un curettaggio delicato dopo l'evacuazione. Disponibile in 7 diverse misure con codice colore per una facile identificazione. Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE. **60 pz / scatola.**

CANNULE PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA SEMIRIGIDE

Codice	CND	RDM	Diam. mm	Lung. mm
60346	U080104	25403/R	6	240
60347	U080104	25415/R	7	240
60348	U080104	25421/R	8	240
60349	U080104	25432/R	9	240
60350	U080104	25436/R	10	240
60351	U080104	25437/R	11	240
60352	U080104	25439/R	12	240



Caratterizzata da 1 punto di aspirazione e da una estremità diritta con bordi arrotondati. Una zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità dell'inserimento. Il numero indicante il diametro sulla curetta riflette l'orientamento del punto di aspirazione. Disponibile in 6 diverse misure. Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE. **60 pz / scatola.**

CANNULE PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA RIGIDE RETTE

Codice	CND	RDM	Diam. mm	Lung. mm
60340	U080104	25157/R	7	180
60341	U080104	25281/R	8	180
60342	U080104	25183/R	9	180
60343	U080104	25180/R	10	180
60344	U080104	25285/R	11	180
60345	U080104	25323/R	12	180



Caratterizzata da 1 punto di aspirazione e da una estremità curva con bordi arrotondati. Una zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità dell'inserimento. Il numero indicante il diametro sulla curetta riflette l'orientamento del punto di aspirazione. Disponibile in 6 diverse misure. Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE. **60 pz / scatola.**

CANNULE PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA RIGIDE CURVE

Codice	CND	RDM	Diam. mm	Lung. mm
60334	U080104	25336/R	7	180
60335	U080104	25342/R	8	180
60336	U080104	25344/R	9	180
60337	U080104	25348/R	10	180
60338	U080104	25353/R	11	180
60339	U080104	25364/R	12	180

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

FILTRI IDROFOBICI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI

da utilizzare con ISTEROSUTTORI.




L'uso del filtro ANTIBATTERICO/VIRALE evita la contaminazione trasversale fra il paziente e aspiratore chirurgico. Norma **UNI EN ISO 10079/1, punto 44.7**: versamento, perdita, umidità, ingresso di liquidi, pulizia, sterilizzazione e disinfezione. Permette una efficace rimozione delle micro particelle VIRALI e BATTERICHE.

Viene applicato a pressione sul tubo che sta a monte del vaso di raccolta liquidi aspirati per evitare, sia l'inquinamento batteriologico dell'aspiratore chirurgico stesso, sia l'immissione nell'ambiente di aria aspirata potenzialmente inquinata.


La membrana di filtraggio in **PTFE è BIDIREZIONALE** ed evita le preoccupazioni di orientamento dell'aspirazione. La struttura del filtro è trasparente in STYROLUX ad alta resistenza, estremamente leggera impedisce di attorcigliare il tubo di aspirazione.

È un filtro conforme alle **Norme BS EN 13328-1** (sodium flame test for air filters), testato al 100% in conformità alla Norma. Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) - (RDM: 12748/R - CND: Z120105)

CE 0051

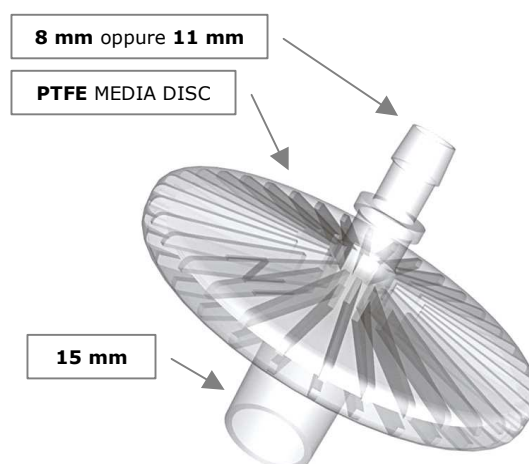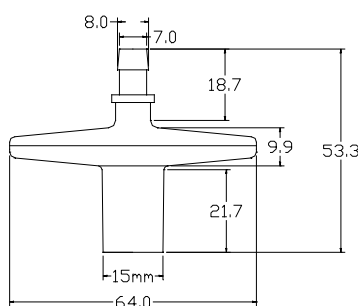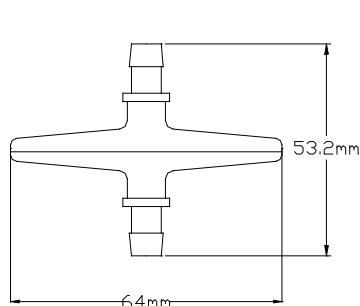

Codice	Descrizione	Confezione
66965	FILTRO antibatterico/virale 8 x 8 mm	Pezzi: 30
66966	FILTRO antibatterico/virale 8 x 15 mm	Pezzi: 30
66969	FILTRO antibatterico/virale 11 x 15 mm	Pezzi: 30

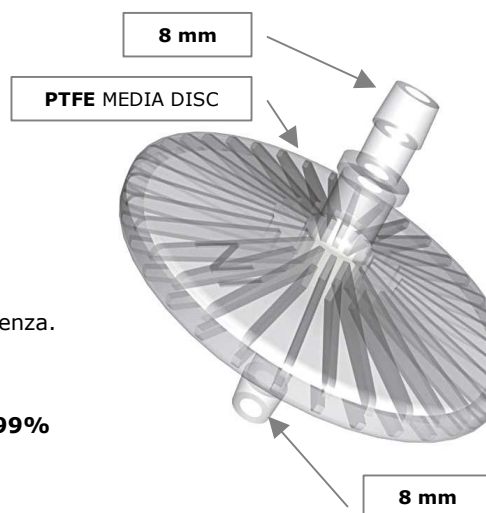

Caratteristiche tecniche:

Membrana filtrante in **PTFE HYDROPHOBIC MEDIA DISC**,
Involucro in materiale acrilico trasparente STYROLUX ad alta resistenza.

TEST NELSON LABORATORIES USA

Rimuove particelle da **0,27 µm** con un'efficacia del **99,9999%**

Rimuove virus e batteri con un'efficacia della filtrazione del **99,9999%**

Area di filtrazione **24.6 cm²**

Temperatura massima **≥ 100** gradi C

Pressione massima **≥ 1,378 bar** (137, 80 kPa)

Tenuta di pressione **0.69 bar** (69,00 kPa) per 10 minuti

Compatibilità di sterilizzazione ETHYLENE OXIDE

I materiali di costruzione hanno superato le prove di citotossicità della plastica

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>