



Siem-Nova S.r.l.

Via C. Varalli n° 1 C/18/19 - 20089 Rozzano (Milano)

tel: +39 02 57510916 - fax: +39 02 57511879

web site: <http://www.siemnova.com>

e-mail: info@siemnova.com

Siem Nova dal 1953 è un'azienda leader
tra i principali produttori di apparecchiature medicali.

Vende ed assiste prodotti aventi proprio marchio.

Commercializza prodotti con diverso marchio.

Siem Nova è in grado di offrire attività di ingegneria clinica.

La flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le esigenze
operative di ogni tipologia di clientela, sia con la gestione del servizio
di manutenzione preventiva che con interventi di manutenzione correttiva.

CATALOGO

LIPOSUTTORI CHIRURGICI

ED ACCESSORI...



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

La liposuzione è una tecnica chirurgica che consiste nell'asportazione di parte del grasso sottocutaneo attraverso una cannula. Vengono praticate piccole incisioni di alcuni millimetri, a cui segue l'inserimento sottocutaneo nel tessuto adiposo di cannule con forma e dimensione appropriata. Consente di eliminare alcuni chilogrammi di grasso tramite aspirazione.

Si tratta di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti.

Si applica in molti casi per risolvere un problema di cellulite, ma anche per trattare il Lipoma.

Il liposuttore 6110 A1 LIPO MAX è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza da 120 L/min, oppure da 90 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.

Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A1 LIPO MAX
Codice: 66193 - 66193.1

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO

ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa

Depressione massima regolabile: **0 ÷ - 0,98 bar**

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)

e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

(RDM 12748/R - CND Z 120105)

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico

verniciato ad alta resistenza alla corrosione

struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 22 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:

120 L/min, 98 kPa codice: 66193 (da 7,2 m3/h)

90 L/min, 98 kPa codice: 66193.1 (da 5,4 m3/h)

Tempo per raggiungere **0,6 bar: 3,00"** con vaso da 3000ml.

Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 2 da 3000 ml,

Predisposizione all'utilizzo con contenitori monouso.

Deviatore rapido di aspirazione: vaso1 - vaso 2

Regolatore di precisione della potenza di aspirazione

Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON

Antirimpimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliori alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**



CE 0051


Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

Il liposuttore 6110 A1 LIPO MAX è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori. La pompa aspirante di grande potenza da 120 L/min, oppure da 90 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

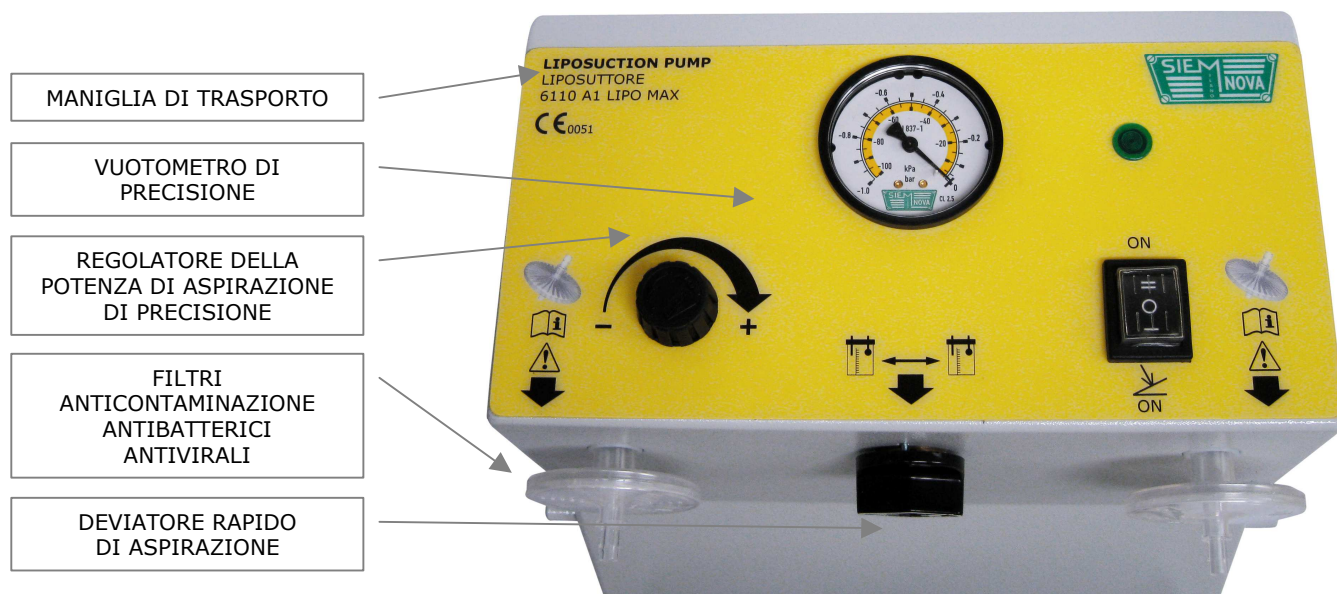

TUBO E MANIPOLO GIREVOLE
MONOUSO E PLURIUSO

6110-A1 LIPO MAX
Codice: 66193
Codice: 66193.1



VASI MONOUSO

VASI PLURIUSO

INTERRUTTORE PNEUMATICO

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

La liposuzione è una tecnica chirurgica che consiste nell'asportazione di parte del grasso sottocutaneo attraverso una cannula. Vengono praticate piccole incisioni di alcuni millimetri, a cui segue l'inserimento sottocutaneo nel tessuto adiposo di cannule con forma e dimensione appropriata. Consente di eliminare alcuni chilogrammi di grasso tramite aspirazione.

Si tratta di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti.

Si applica in molti casi per risolvere un problema di cellulite, ma anche per trattare il lipoma.

Il liposuttore 6110 A2 LIPO SPEEDY è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza da 120 L/min, oppure da 90 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.

Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A2 LIPO SPEEDY
Codice: 66198 - 66197

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO

ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa

Depressione massima regolabile: $0 \div -0,98$ bar

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)

e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

(RDM 12748/R - CND Z 120105)

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V $\pm$ 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico

verniciato ad alta resistenza alla corrosione

struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 20 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:

120 L/min, 98 kPa codice: 66198 (da 7,2 m³/h)

90 L/min, 98 kPa codice: 66197 (da 5,4 m³/h)

Tempo per raggiungere **0,6 bar: 3,00"** con vaso da 3000ml.

Vaso PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 1 da 3000 ml,

Sacca monouso da 3000 ml,

Predisposizione all'utilizzo con contenitori pluriuso e monouso.

Regolatore di precisione della potenza di aspirazione

Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON

Antirimpimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliori alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**



CE0051


Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

Il liposuttore 6110 A2 LIPO SPEEDY è un aspiratore straordinariamente potente, concepito per il funzionamento in sala operatoria per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori. La pompa aspirante di grande potenza da 120 L/min, oppure da 90 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

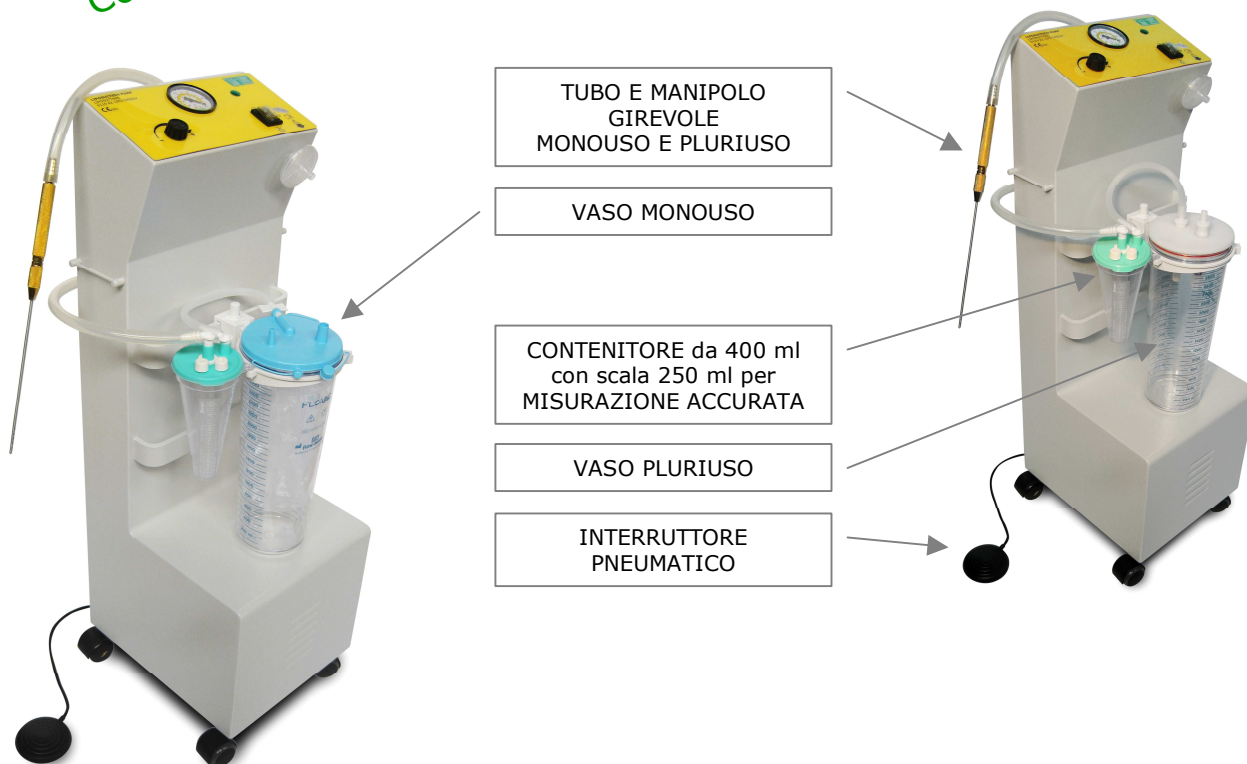

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

ASPIRATORE CHIRURGICO PER LIPOSUZIONE

La pompa aspirante di grande potenza, senza olio (OIL-LESS),
 mantiene prestazioni costanti, con funzionamento continuo.
 Il telaio è in abs verniciato ed è predisposto all'utilizzo con contenitori pluriuso e monouso.

CE 0123



Caratteristiche tecniche:

ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa

Depressione massima regolabile: $0 \div -0,98$ bar

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **AC220V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 2\%$**

Potenza / Corrente nominale: **150VA $\leq +15\%$**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'umidità: **IP33 comune**

Conforme alle Norme e direttive di riferimento:

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)

e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Telaio carrellato in ABS verniciato ad alta resistenza alla corrosione

✓ **Pesa 12 kg** (21 Kg con carrello)

✓ **Dimensioni: largo 380, prof. 320, H. 350 mm**

Pompa aspirante OIL-LESS 45 L/min circa 2,0 m³/h

Tempo per raggiungere 0,6 bar: 6,88" con vaso da 2000 ml;

Antirimpimento eccessivo

con valvole galleggianti e vasetto 200ml di troppo pieno.

Anticontaminazione

con filtro idrofobico antibatterico/virale

Vuotometro a lancetta Da 0 a -1 bar

Regolatore del livello di aspirazione da 0,2 bar al vuoto massimo

Vasi di raccolta:

N° 1 contenitore da 2000 ml pluriuso completi di tappo ed innesti

N° 1 sacca monouso da 2000 ml

Rumorosità di funzionamento minore di 55 dB

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.

Su richiesta: **Carrello in ABS con 4 ruote e barra portavasi**

Mod: LIPO JUNIOR YDX
Codice: 66137



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
 20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
 fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO

La liposuzione è una tecnica chirurgica che consiste nell'asportazione di parte del grasso sottocutaneo attraverso una cannula. Vengono praticate piccole incisioni di alcuni millimetri, a cui segue l'inserimento sottocutaneo nel tessuto adiposo di cannule con forma e dimensione appropriata. Si tratta di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti.

Si applica in molti casi per risolvere un problema di cellulite, ma anche per trattare il Lipoma.

Il liposuttore 6110 A4 LIPO JUNIOR è un aspiratore potente, concepito per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza da 30 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 2000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.

Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato e può essere montato su carrello, provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.



**6110-A4
LIPO JUNIOR
Codice: 66136**

CE0051

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 87 kPa

Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,87 bar

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57718/R - CND Z 12080203)

Modalità d'impiego **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **95 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

**Telaio in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro**

• Larghezza 360, prof. 320, H. 220mm

• Peso 6,5 Kg.

• Maniglia di trasporto

Pompa aspirante OIL-LESS 30 L/min. circa 2,0 m3/h

Tempo per raggiungere 0,6 bar: 6,88" con vaso da 2000 ml

9,66" con vaso da 3000 ml.

DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE
Antirimpimento eccessivo con valvola di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtro idrofobico antibatterico/virale

Vaso di raccolta pluriuso con predisposizione al monouso:
n° 1 oppure 2 contenitori da 2000 ml.

Vuotometro a lancetta Da 0 a -1 bar

Regolatore della potenza di aspirazione da 0,2 bar al vuoto massimo

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18

fax: 02 57511879 tel: 02 57510916

info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

LIPOSUTTORE CHIRURGICO ELETTRICO


La liposuzione è una tecnica chirurgica che consiste nell'asportazione di parte del grasso sottocutaneo attraverso una cannula. Vengono praticate piccole incisioni di alcuni millimetri, a cui segue l'inserimento sottocutaneo nel tessuto adiposo di cannule con forma e dimensione appropriata. Si tratta di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti.

Si applica in molti casi per risolvere un problema di cellulite, ma anche per trattare il Lipoma.

Il liposuttore 6110 A4 LIPO JUNIOR è un aspiratore potente, concepito per l'aspirazione strumentale di parte del grasso corporeo sottocutaneo e per operare in assoluta sicurezza per il paziente e gli operatori.

La pompa aspirante di grande potenza da 30 L/min, è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 2000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.

Il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato e può essere montato su carrello, provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

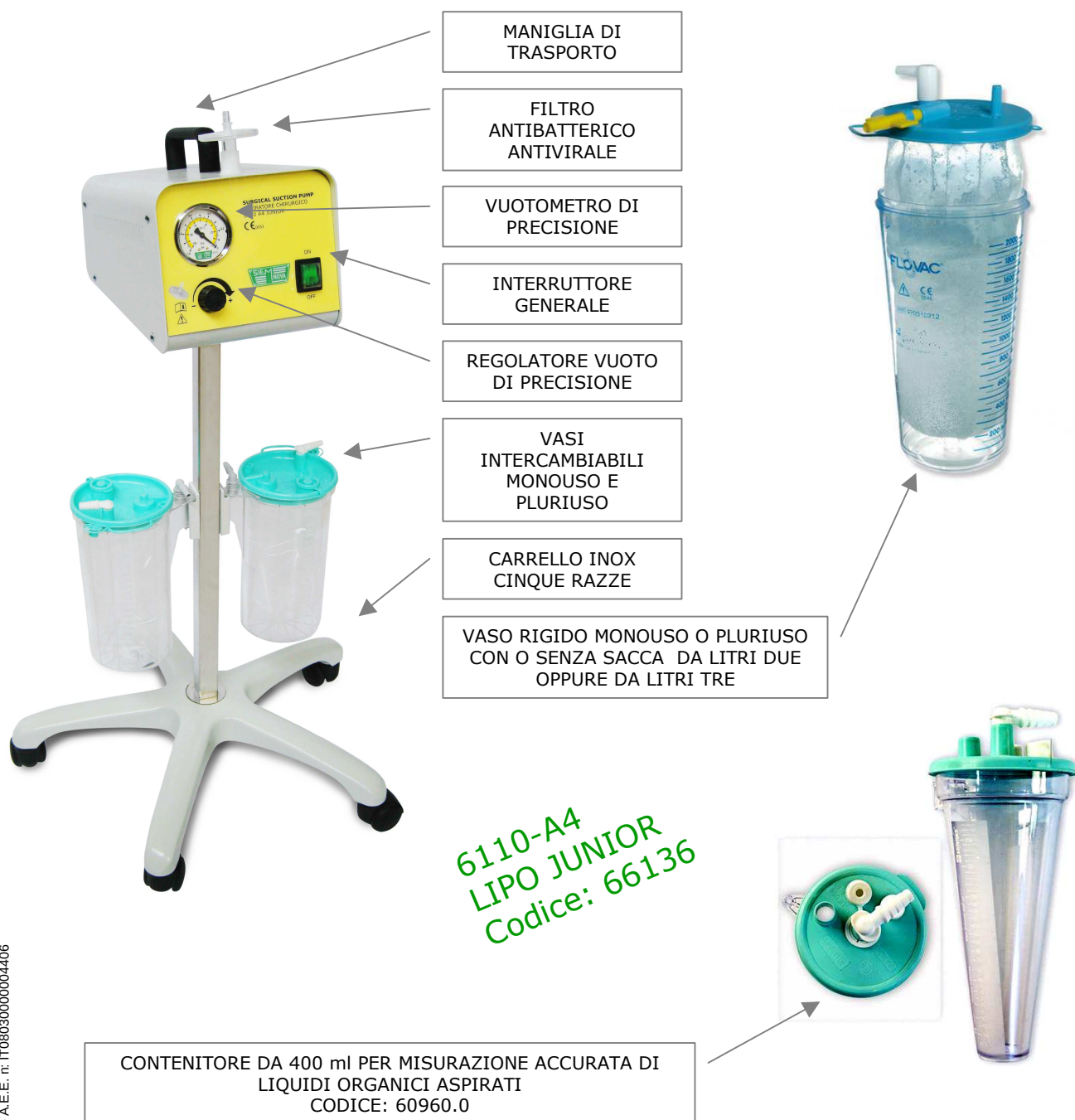

6110-A4
LIPO JUNIOR
Codice: 66136

CONTENITORE DA 400 ml PER MISURAZIONE ACCURATA DI
LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI
CODICE: 60960.0

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

FILTRI IDROFOBICI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI

da utilizzare con aspiratori chirurgici impiegati nella raccolta di liquidi organici.



L'uso del filtro ANTIBATTERICO/VIRALE evita la contaminazione trasversale fra il paziente e aspiratore chirurgico. Norma **UNI EN ISO 10079/1, punto 44.7**: versamento, perdita, umidità, ingresso di liquidi, pulizia, sterilizzazione e disinfezione. Permette una efficace rimozione delle micro particelle VIRALI e BATTERICHE.

Viene applicato a pressione sul tubo che sta a monte del vaso di raccolta liquidi aspirati per evitare, sia l'inquinamento batteriologico dell'aspiratore chirurgico stesso, sia l'immissione nell'ambiente di aria aspirata potenzialmente inquinata.


La membrana di filtraggio in **PTFE è BIDIREZIONALE** ed evita le preoccupazioni di orientamento dell'aspirazione. La struttura del filtro è trasparente in STYROLUX ad alta resistenza, estremamente leggera impedisce di attorcigliare il tubo di aspirazione.

È un filtro conforme alle **Norme BS EN 13328-1** (sodium flame test for air filters), testato al 100% in conformità alla Norma. Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) - (**RDM 12748/R - CND Z 120105**)

CE 0051

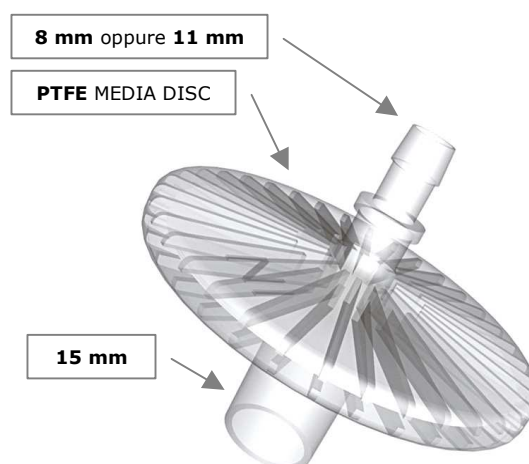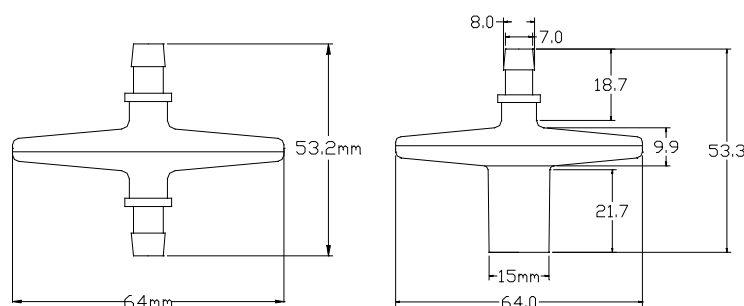

Codice	Descrizione	Confezione
66965	FILTRO antibatterico/virale 8 x 8 mm	Pezzi: 30
66966	FILTRO antibatterico/virale 8 x 15 mm	Pezzi: 30
66969	FILTRO antibatterico/virale 11 x 15 mm	Pezzi: 30

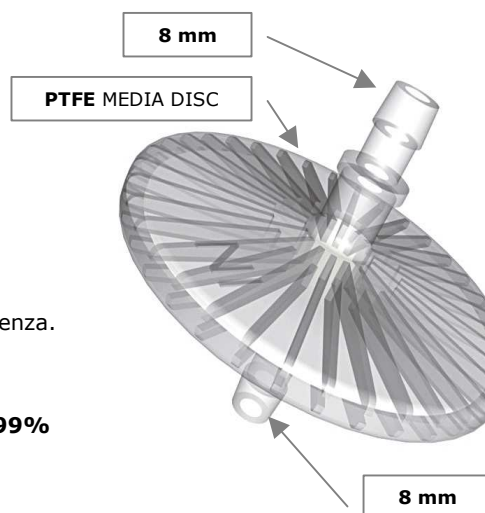

Caratteristiche tecniche:

Membrana filtrante in **PTFE HYDROPHOBIC MEDIA DISC**,
Involucro in materiale acrilico trasparente STYROLUX ad alta resistenza.

TEST NELSON LABORATORIES USA

Rimuove particelle da **0,27 µm** con un'efficacia del **99,9999%**

Rimuove virus e batteri con un'efficacia della filtrazione del **99,9999%**

Area di filtrazione **24.6 cm²**

Temperatura massima **≥ 100** gradi C

Pressione massima **≥ 1,378 bar** (137, 80 kPa)

Tenuta di pressione **0.69 bar** (69,00 kPa) per 10 minuti

Compatibilità di sterilizzazione ETHYLENE OXIDE

I materiali di costruzione hanno superato le prove di citotossicità della plastica

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON ASPIRATORI CHIRURGICI IMPIEGATI NELLA RACCOLTA DI LIQUIDI ORGANICI

Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Codice	Descrizione
90054	Vaso in policarbonato MAK 300 ml con tappo e valvola di troppo pieno
90055	Vaso in policarbonato MAK 500 ml con tappo e valvola di troppo pieno
90058	Vaso in policarbonato MAK 1000 ml con tappo e valvola di troppo pieno
90059.1	Vaso in policarbonato MAK 2000 ml con tappo e valvola di troppo pieno può contenere sacche monouso
90060	Vaso in policarbonato MAK 4000 ml con tappo e valvola di troppo pieno
60971	Vaso in policarbonato LINER 1000 ml può contenere sacche monouso
60972	Vaso in policarbonato LINER 2000 ml può contenere sacche monouso
60973	Vaso in policarbonato LINER 3000 ml può contenere sacche monouso
60974	TAPPO in policarbonato per LINER
60475	Innesto derling diametro 10 mm
60478	Innesto derling su valvola di troppo pieno
60817	Valvola di troppo pieno
60900	Vaso in policarbonato ASPEED 500 ml con tappo e valvola di troppo pieno
60901	Vaso in policarbonato ASPEED 1000 ml con tappo e valvola di troppo pieno può contenere sacche monouso
60181	Vaso in policarbonato YDX 3000 ml con tappo e valvola di troppo pieno



L'aspiratore chirurgico necessita di manutenzione ordinaria dopo ogni utilizzo.

Dopo l'uso devono essere sostituiti tutti i prodotti classificati monouso: tubazione, raccordi, contenitori di liquidi organici, filtri anticontaminazione virale/batterica, ecc... Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal DPR 28/11/90 è finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio. Gettare il prodotto aspirato rispettando le norme in vigore presso l'ospedale.

Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detersivi neutri e/o sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.

Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione: l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI E SACCHE MONOUSO

DA UTILIZZARE CON ASPIRATORI CHIRURGICI

IMPIEGATI NELLA RACCOLTA DI LIQUIDI ORGANICI

Canister

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Il dispositivo **FLOVAC® CANISTER**

viene utilizzato per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione ed è stato progettato e costruito per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" (EN ISO 10079-3).

Canister: costituito da un contenitore rigido ad uso singolo e da un coperchio da accoppiare ermeticamente.

Il coperchio è dotato di connettori che consentono il collegamento del contenitore di raccolta con la linea di aspirazione e con il paziente.

La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il paziente, sia per il personale addetto alla rimozione o sostituzione del dispositivo stesso.

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60962	A0699	101132	CANISTER MONOUSO 1000 ml	Pezzi:60
60963	A0699	101132	CANISTER MONOUSO 2000 ml	Pezzi:50
60964	A0699	101132	CANISTER MONOUSO 3000 ml	Pezzi:30



Liner

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

Il dispositivo **FLOVAC® LINER**

viene utilizzato per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione ed è stato progettato e costruito per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" (EN ISO 10079-3).

Liner: costituito da una sacca saldata ermeticamente al coperchio (sistema di raccolta ad uso singolo) e da un contenitore rigido di supporto. La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il paziente, sia per il personale addetto alla rimozione o sostituzione del dispositivo stesso.

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60965	A0699	101142	LINER SACCA 1000 ml	Pezzi:50
60966	A0699	101142	LINER SACCA 2000 ml	Pezzi:50
60967	A0699	101142	LINER SACCA 3000 ml	Pezzi:50
60971	A0699	101179	LINER CANISTER REUSABLE 1000 ml	Pezzi:15
60972	A0699	101179	LINER CANISTER REUSABLE 2000 ml	Pezzi:10
60973	A0699	101179	LINER CANISTER REUSABLE 3000 ml	Pezzi:5



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

KIT STERILE MONOUSO COMPOSTO DA SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI E TUBO DI ASPIRAZIONE

Il dispositivo è una sacca di raccolta di liquidi aspirati completa di tubazione sterile,

il dispositivo è autosigillante per garantire l'assoluta assenza di fuoriuscita di fluidi ed è composto da:
Tubo lungo 80cm diametro interno 6,5mm esterno 10mm per attacco al vuoto dell' aspiratore, dotato di valvola interna con funzione di filtro antibatterico per la protezione da contaminazioni;
Tubo lungo 200cm diametro interno 10mm esterno 16mm per attacco alla cannula paziente, dotato di valvola unidirezionale con antireflusso al distacco tubo paziente, antischiama, protezione aerosol e protezione fumi.
Accesso con chiusura di sicurezza per immissione di sostanze coagulanti e/o battericide, con possibilità di prelevare campioni di aspirato. Depressione massima di utilizzo - 560 mmHg (-750 mBar)

SACCA STERILE CON TUBAZIONE

DESCRIZIONE :

Il dispositivo è destinato alla raccolta di liquidi biologici diversi in ambito chirurgico.

MATERIALE: Polietilene specifico per applicazioni medicali.

Il dispositivo è privo di lattice.

CONFEZIONAMENTO: Confezionato singolarmente in singola busta.

CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CE (s.m.i.): Classe I sterile.

STERILIZZAZIONE: Il dispositivo è venduto in forma sterile.

STOCCAGGIO: Normali procedure di immagazzinamento.

Temperature di stoccaggio consigliate tra 10° C e 35° C.

SMALTIMENTO:

Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.



VASO RIGIDO

DESCRIZIONE : Il dispositivo è un contenitore rigido pluriuso per sacche di raccolta per liquidi aspirati

APPLICAZIONI: Alloggiamento pluriuso per sacche di raccolta liquidi aspirati.

MATERIALE: Policarbonato specifico per applicazioni medicali.

Il dispositivo è privo di lattice.

CONFEZIONAMENTO: Confezionato singolarmente in singola busta.

CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CE (s.m.i.):

Classe I non sterile.

STOCCAGGIO: Normali procedure di immagazzinamento.

Temperature di stoccaggio consigliate tra 10° C e 35° C.

SMALTIMENTO:

Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.



Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60968.3	A0680	84360	VASO RIGIDO 3000 ml PER SACCA	Pezzi:4
60968.4	A0680	84360	KIT STERILE MONOUSO SACCA 3000ml E TUBAZIONI	Pezzi:40

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

KIT LIPOVAC STERILE MONOUSO PER LA RACCOLTA DEL GRASSO DURANTE INTERVENTI DI LIPOFILLING

Durante gli interventi di lipofilling il grasso viene aspirato per mezzo di una sottile cannula da una determinata zona del corpo (interno ginocchio, piega glutea, fianchi, ecc.). Il grasso prelevato viene opportunamente trattato in modo da liberarlo delle impurità; per questa procedura si ricorre ad una speciale centrifuga ad alta velocità.

Il grasso viene quindi inoculato con una microsiringa nelle zone precedentemente stabilite, distribuendosi e svolgendo così la sua azione di riempimento. Il LIPOVAC, posto in serie al circuito di aspirazione, consente la connessione diretta alle cannule utilizzate per l'aspirazione del grasso. Il grasso aspirato viene raccolto nel serbatoio del LIPOVAC.

Una volta terminata l'aspirazione e disconnessi i tubi di aspirazione, il grasso può essere riversato con estrema facilità direttamente nelle provette utilizzate nella centrifuga. Questa operazione si svolge con procedura estremamente igienica e sicura non dovendo nemmeno aprire il serbatoio del LIPOVAC; il grasso può fuoriuscire infatti dal connettore laterale del serbatoio con precisione e semplicità.

LIPOVAC
Codice: 66212



LIPOVAC

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
CLASSE II a

Descrizione:

Dispositivo studiato per agevolare il chirurgo
nella raccolta del grasso durante gli interventi di lipofilling.

Specifiche:

Il coperchio ed il contenitore sono realizzati in ABS (Styrene butadiene copolimero)

Coperchio dotato di aggancio Fastlock

Nervature sulla superficie garantiscono una buona presa anche con le mani bagnate

Il tubo di connessione in silicone flessibile di lunghezza 75cm., diametro interno 7,9mm. e diametro

Esterno 12,7mm. permette notevole maneggevolezza

Capacità effettiva del contenitore 200ml.

Confezionamento in doppia busta Peel, carta medica accoppiata PET-PE

Sterilizzato a raggi gamma

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
66212	A06030401	360906	LIPOVAC 200ml	Pezzi:40

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

CANNULE ED ACCESSORI PER LIPOSUZIONE

Ampia gamma di cannule in **acciaio inox** di differenti diametri, lunghezze e tipologie.
Possibilità di creare combinazioni secondo esigenze individuali.

CANNULE: Ø 2, 3, 4, 6 mm; Lunghezze 150, 200, 300 mm.

FORI: Ø 1, 1,5, 2 mm; 1, 2 centrali.



*SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.***

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

TUBAZIONE IN SILICONE PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON LIPOSUTTORI CHIRURGICI

TUBO SILICONE trasparente durezza SR-80/T

Codice: 66234 diametro 10 x 16 mm. Confezione 30m

Codice: 66235 diametro 9 x 15 mm. Confezione 30m

Codice: 66233 diametro 7 x 13 mm. Confezione 30m

Codice: 66232 diametro 6 x 10 mm. Confezione 30m

Codice: 66231 diametro 5 x 9 mm. Confezione 30m

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 12748/R – CND: Z120105)

Utilizzo: Prodotto impiegato nella raccolta di liquidi organici,
da utilizzare con aspiratore chirurgico SIEM-NOVA.
Temperatura d'impiego: Min. -60 °C Max 200 °C
Composizione elastomero siliconico di base: V M Q



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Peso specifico UNI 7092-A g/cm³ 1,210 +/- 0,020

Durezza UNI 4916 SHORE A 80,000 +/- 5,000

Carico di rottura UNI 6065 MPa 15,000 min

Allungamento a rottura UNI 6065 % 200,000 min

Resistenza alla lacerazione ASTM D 624/B KN/m 15,000 min

Compressione Set Sch.25% 22h a 175 °C UNI 4913/A % 40,000 max

Resistenze chimiche e fisiche:

Aria calda fino a 200 °C Ottima

Agenti atmosferici: Ottima

Ozono: Ottima

Irrigidimento bassa temperatura: Ottima

Idrocarburi alifatici: Insufficiente

Olii minerali paraffinici: Buona

Olii animali e/o vegetali: Ottima

Idrocarburi aromatici: Insufficiente

Solventi clorurati: Insufficiente

Chetoni: Sufficiente

Acidi Sufficiente

Basi: Sufficiente

Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e fisiche si devono considerare indicazioni di massima, e comunque i dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la società siem-nova.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

TUBAZIONE IN PVC MEDICALE MONOUSO

DA UTILIZZARE CON LIPOSUTTORI CHIRURGICI

TUBO DI ASPIRAZIONE MEDICALE IN CONFEZIONE SINGOLA MONOUSO

TUBO STERILE
10x16mm
Codice: 60323.0



Tubo medicale di raccordo a sezione costante in materiale che conferisce caratteristiche di trasparenza per visualizzare il materiale biologico in aspirazione, ed antipiegamento per un più agevole utilizzo nelle diverse posizioni.

Tubo a sezione costante sterile monouso con terminale femmina maschio.

APPLICAZIONI

Il tubo è destinato ad essere utilizzato per l'aspirazione grandi volumi in chirurgia.

MATERIALE

PVC e ABS specifico per applicazioni medicali.

Il dispositivo è privo di lattice.

CONFEZIONAMENTO

Confezionato singolarmente in doppia busta medicale.

CLASSE DI APPARTENENZA

Classe I sterile.

STERILIZZAZIONE

Prodotto sterilizzato ad ossido di etilene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

STOCCAGGIO

Normali procedure di immagazzinamento.

Temperature di stoccaggio consigliate tra 10°C e 35°C.

e non ad un'umidità eccessiva

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento l'utilizzatore deve seguire le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.

Conforme alle Norme e direttive di riferimento:

Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)

Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60323.0	A060102	29654	TUBO STERILE IN PVC CON RACCORDO Diametro tubo 10 x 16mm Lunghezza 3000mm	Pezzi:20

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>