



Siem-Nova S.r.l.

Via C. Varalli n° 1 C/18/19 - 20089 Rozzano (Milano)

tel: +39 02 57510916 - fax: +39 02 57511879

web site: <http://www.siemnova.com>

e-mail: info@siemnova.com

Siem Nova dal 1953 è un'azienda leader
tra i principali produttori di apparecchiature medicali.

Vende ed assiste prodotti aventi proprio marchio.

Commercializza prodotti con diverso marchio.

Siem Nova è in grado di offrire attività di ingegneria clinica.

La flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le esigenze
operative di ogni tipologia di clientela, sia con la gestione del servizio
di manutenzione preventiva che con interventi di manutenzione correttiva.

CATALOGO

VENTOSE OSTETRICHE FETALI ED ACCESSORI...



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VENTOSA OSTETRICA FETALE

Consiste in una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed accensione automatica.

Viene utilizzata per accelerare l'espletamento del parto in caso di:

- a) ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine;
- b) donna non collaborante nel periodo espulsivo;
- c) segni di inizio di sofferenza fetale.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A9
VENTOSA MAX
Codice: 66199

CE 0051

VENTOSA OSTETRICA FETALE

ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa

Depressione massima regolabile: **0 ÷ - 0,98 bar**

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57729/R - CND Z 12080301)

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico

verniciato ad alta resistenza alla corrosione

struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 22 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:

90 L/min, 98 kPa codice: 66190 (da 5,4 m3/h)

Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 2 da 2000 ml,

Predisposizione all'utilizzo con contenitori monouso.

Deviatore rapido di aspirazione:

Vaso 1 **VACUUM EXTRACTOR** - Vaso 2 **ASPIRATORE**

Regolatore ventosa a 4 stadi di vuoto: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar

Regolatore aspiratore da 0,2 bar al vuoto massimo

Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON

Antirimpimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorare alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.



Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VENTOSA OSTETRICA FETALE

Consiste in una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed accensione automatica.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.



**6110-A9
VENTOSA MAX
Codice: 66199**

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VENTOSA OSTETRICA FETALE

Consiste in una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed accensione automatica.

Viene utilizzata per accelerare l'espletamento del parto in caso di:

- a) ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine;
- b) donna non collaborante nel periodo espulsivo;
- c) segni di inizio di sofferenza fetale.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

6110-A10
VENTOSA SIEM
Codice: 66200

CE 0051

VENTOSA OSTETRICA FETALE

ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa

Depressione massima regolabile: **0 ÷ - 0,98 bar**

Caratteristiche tecniche:

Conforme alle Norme e direttive di riferimento

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)

e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

(RDM 57729/R - CND Z 12080301)

Modalità d'impiego: **FUNZIONAMENTO CONTINUO**

Tensione nominale: **230 V ± 10%, 50 Hz**

Potenza / Corrente nominale: **230 VA - 325 VA**

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **classe I**

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: **tipo B**

Grado di protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi: **IP33**

Vita operativa prevista: **10 anni**

Disponibilità ricambi: **15 anni**

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico

verniciato ad alta resistenza alla corrosione

struttura compatta e di minimo ingombro

- **Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm**
- **Peso 22 Kg.**
- **Ruote di grande dimensione n° 4**
- **Tasca porta sondini laterale n° 1**
- **Maniglia di trasporto**

Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:

90 L/min, 98 kPa codice: 66190 (da 5,4 m³/h)

Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 1 da 2000 ml,

Predisposizione all'utilizzo con contenitori monouso.

Regolatore ventosa a 4 stadi di vuoto: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar

Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a -1 bar

Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON

Antiriempimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.

Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale

Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB

Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d'uso.

L'assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.



SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VENTOSA OSTETRICA FETALE

Consiste in una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed accensione automatica.

La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS), raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00" e lo mantiene costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.



Ventosa ostetrica metallica **Malmström**.
disponibile nelle misure:
Ø 40, 50, 60 mm.

Valvola di scarico vuoto

Ventosa **Silc Cup** MORBIDA
con tubi in silicone, per parti
delicati disponibile nelle
misure: Ø 50 e 60 mm.

INTERRUTTORE A PEDALE

**6110-A10
VENTOSA SIEM
Codice: 66200**

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

PRODOTTI DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA

VENTOSA OSTETRICA FETALE IN ACCIAIO INOX

Consiste in una coppetta metallica in acciaio inox, che viene collegata tramite un tubo ad una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed accensione automatica. Viene utilizzata per accelerare l'espletamento del parto in caso di: a) ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine; b) donna non collaborante nel periodo espulsivo; c) segni di inizio di sofferenza fetale.

Conforme alle Norme e direttive vigenti:

ISO 9001 - ISO 13485 - CEI EN 60601-1 (CEI 62-5);

Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)



Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60870	Z12080301	75409	Ventosa inox Malmström 40 mm	Pezzi:1
60871	Z12080301	75430	Ventosa inox Malmström 50 mm	Pezzi:1
60872	Z12080301	75432	Ventosa inox Malmström 60 mm	Pezzi:1
60905	V0299	152619/R	Valvola di scarico STERILIZZABILE	Pezzi:10
66233	Z12080301	57729/R	Tubo silicone SR-80T 7x13mm	Metri:30
60891	Z12080301	57729/R	Raccordo inox con tubo silicone	Pezzi:10

VENTOSA OSTETRICA FETALE IN SILICONE

La "SILC CUP" è in silicone di tipo medicale ed è disponibile in due misure: 50 e 60 mm. di diametro interno.

Si tratta di uno strumento mono-pezzo composto da impugnatura e ventosa da usarsi con un' ELETTOASPIRATORE CHIRURGICO

Mod: **6110-A 9** oppure Mod: **6110 A10**.

La superficie esterna della ventosa è liscia ed è dotata di un piccolo rilievo longitudinale che permette di osservare qualsiasi rotazione. La superficie interna della ventosa è ricoperta di piccole sporgenze, di 1 mm. di altezza e 4 mm. di diametro, a 3 - 5 mm. l'una dall'altra. Le sporgenze permettono di creare il vuoto eliminando l'aria presente tra la ventosa e la testa del bambino e assicurano che la ventosa aspiri saldamente contro la testa del bambino. La ventosa morbida si deforma, assicurando quindi un'aderenza ottimale, minimizzando i traumi a carico del cuoio capelluto del feto.

Conforme alle Norme e direttive vigenti:

ISO 9001 - ISO 13485 - CEI EN 60601-1 (CEI 62-5); Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)



Codice	CND	RDM	Descrizione	Confezione
60879	Z12080301	75269	Ventosa Silc-Cup 50 mm	Pezzi:1
60880	Z12080301	75295	Ventosa Silc-Cup 60 mm	Pezzi:1
60905	V0299	152619/R	Valvola di scarico STERILIZZABILE	Pezzi:10
66233	Z12080301	57729/R	Tubo silicone SR-80T 7x13mm	Metri:30

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**


Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

PRODOTTI DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA

La ventosa in silicone minimizza il trauma materno e fetale.
Assicura un'applicazione più facile ed il controllo costante di trazione.
Offre una visibilità migliore attraverso la coppetta.
Si usa con pompe manuali o elettriche purché predisposte per ventosa ostetrica fetale.
Il disegno è brevettato. Prodotto è esente da lattice o sottoprodotti del lattice.
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

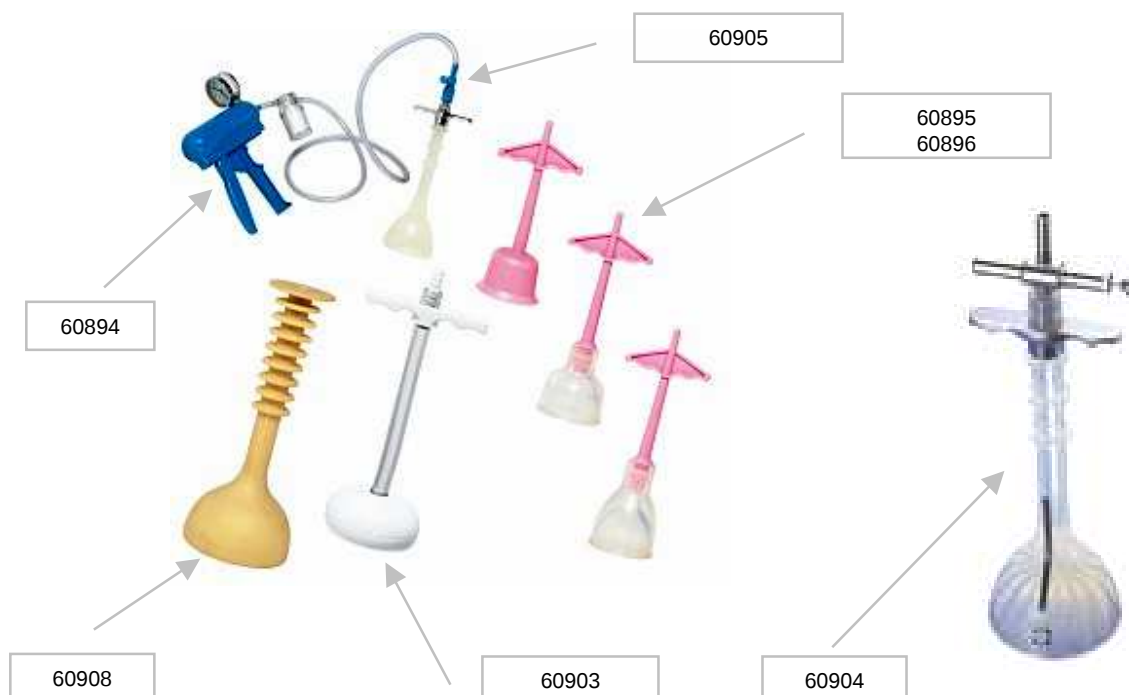

Descrizione	Confezione	Codice:
VENTOSA IN SILICONE (65 mm) sterilizzabile con valvola di scarico	1 pezzo	60904 (CND Z12080301 – RDM 94121)
VALVOLA DI SCARICO VUOTO sterilizzabile	10 pezzi	60905 (CND V0299 – RDM 152619/R)
VENTOSA IN SILICONE sterile monouso	10 pezzi	60895 60 mm (CND V0299 – RDM 152479/R)
	10 pezzi	60896 65 mm (CND V0299 – RDM 152479/R)
	10 pezzi	60897 come 60895 60 mm con valvola di scarico
	10 pezzi	60898 come 60896 65 mm con valvola di scarico
	10 pezzi	60899 come 60896 con valvola di scarico e tubo
VENTOSA IN POLIURETANO sterile monouso	10 pezzi	60903 60 mm (CND V0299 – RDM 152506/R)
VENTOSA Secure Cup™ (63 mm) sterile monouso	10 pezzi	60908 con tubo (CND V0299 – RDM 152406/R)
POMPA MANUALE per vuoto Autoclavabile	1 pezzo	60894 (CND V0299 – RDM 152360/R)

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

FILTRI IDROFOBICI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI

da utilizzare con VENTOSA OSTETRICA.




L'uso del filtro ANTIBATTERICO/VIRALE evita la contaminazione trasversale fra il paziente e aspiratore chirurgico. Norma **UNI EN ISO 10079/1, punto 44.7**: versamento, perdita, umidità, ingresso di liquidi, pulizia, sterilizzazione e disinfezione. Permette una efficace rimozione delle micro particelle VIRALI e BATTERICHE.

Viene applicato a pressione sul tubo che sta a monte del vaso di raccolta liquidi aspirati per evitare, sia l'inquinamento batteriologico dell'aspiratore chirurgico stesso, sia l'immissione nell'ambiente di aria aspirata potenzialmente inquinata.


La membrana di filtraggio in **PTFE è BIDIREZIONALE** ed evita le preoccupazioni di orientamento dell'aspirazione. La struttura del filtro è trasparente in STYROLUX ad alta resistenza, estremamente leggera impedisce di attorcigliare il tubo di aspirazione.

È un filtro conforme alle **Norme BS EN 13328-1** (sodium flame test for air filters), testato al 100% in conformità alla Norma. Conforme alle Norme e direttive di riferimento DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) - (RDM 12748/R - CND Z 120105)

CE 0051

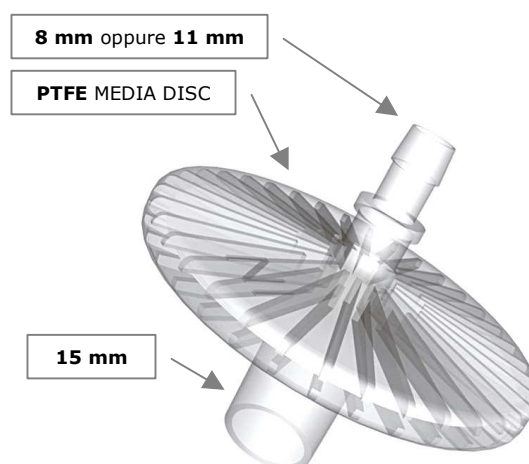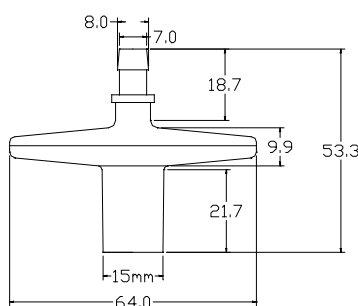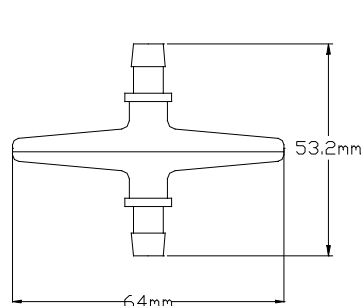

Codice	Descrizione	Confezione
66965	FILTRO antibatterico/virale 8 x 8 mm	Pezzi: 30
66966	FILTRO antibatterico/virale 8 x 15 mm	Pezzi: 30
66969	FILTRO antibatterico/virale 11 x 15 mm	Pezzi: 30

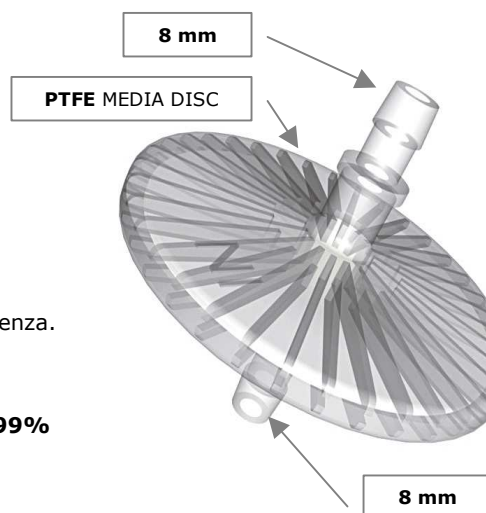

Caratteristiche tecniche:

Membrana filtrante in **PTFE HYDROPHOBIC MEDIA DISC**,
Involucro in materiale acrilico trasparente STYROLUX ad alta resistenza.

TEST NELSON LABORATORIES USA

Rimuove particelle da **0,27 µm** con un'efficacia del **99,9999%**

Rimuove virus e batteri con un'efficacia della filtrazione del **99,9999%**

Area di filtrazione **24.6 cm²**

Temperatura massima **≥ 100** gradi C

Pressione massima **≥ 1,378 bar** (137, 80 kPa)

Tenuta di pressione **0.69 bar** (69,00 kPa) per 10 minuti

Compatibilità di sterilizzazione ETHYLENE OXIDE

I materiali di costruzione hanno superato le prove di citotossicità della plastica

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

VASI PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA FETALE

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57729/R - CND Z 12080301)

Codice	Descrizione
90059.1	Vaso in polycarbonato MAK 2000 ml con tappo e valvola di troppo pieno può contenere sacche monouso
60972	Vaso in polycarbonato LINER 2000 ml può contenere sacche monouso
60974	TAPPO in polycarbonato per LINER
60475	Innesto derling diametro 10 mm
60478	Innesto derling su valvola di troppo pieno
60817	Valvola di troppo pieno
60851	Vaso in VETRO e POLICARBONATO 1600 ml
60811	TESTINA IN POLICARBONATO PER VASO IN VETRO con valvola di troppo pieno
60181	Vaso in polycarbonato YDX 3000 ml con tappo e valvola di troppo pieno



La ventosa ostetrica necessita di manutenzione ordinaria dopo ogni utilizzo.

Dopo l'uso devono essere sostituiti tutti i prodotti classificati monouso: tubazione, raccordi, contenitori di liquidi organici, filtri anticontaminazione virale/batterica, ecc... Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal DPR 28/11/90 è finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio.

Gettare il prodotto aspirato rispettando le norme in vigore presso l'ospedale.

Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e/o sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.

Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione: l'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.

La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.**

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>

TUBAZIONE IN SILICONE PLURIUSO

DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA FETALE

TUBO SILICONE trasparente durezza SR-80/T

Codice: 66234 diametro 10 x 16 mm. Confezione 30m

Codice: 66235 diametro 9 x 15 mm. Confezione 30m

Codice: 66233 diametro 7 x 13 mm. Confezione 30m

Codice: 66232 diametro 6 x 10 mm. Confezione 30m

Codice: 66231 diametro 5 x 9 mm. Confezione 30m

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 12748/R – CND: Z120105)

Utilizzo: Prodotto impiegato nella raccolta di liquidi organici,
da utilizzare con aspiratore chirurgico SIEM-NOVA.
Temperatura d'impiego: Min. -60 °C Max 200 °C
Composizione elastomero siliconico di base: V M Q



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:

Peso specifico UNI 7092-A g/cm³ 1,210 +/- 0,020

Durezza UNI 4916 SHORE A 80,000 +/- 5,000

Carico di rottura UNI 6065 MPa 15,000 min

Allungamento a rottura UNI 6065 % 200,000 min

Resistenza alla lacerazione ASTM D 624/B KN/m 15,000 min

Compressione Set Sch.25% 22h a 175 °C UNI 4913/A % 40,000 max

Resistenze chimiche e fisiche:

Aria calda fino a 200 °C Ottima

Agenti atmosferici: Ottima

Ozono: Ottima

Irrigidimento bassa temperatura: Ottima

Idrocarburi alifatici: Insufficiente

Olii minerali paraffinici: Buona

Olii animali e/o vegetali: Ottima

Idrocarburi aromatici: Insufficiente

Solventi clorurati: Insufficiente

Chetoni: Sufficiente

Acidi Sufficiente

Basi: Sufficiente

Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e fisiche si devono considerare indicazioni di massima, e comunque i dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la società siem-nova.

*SIEM-NOVA è attenta all'ambiente, **utilizza materiali facilmente riciclabili** ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, **nel rispetto della sicurezza e della qualità.***

Siem - Nova



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - <http://www.siemnova.com>